

主な仕様



型式	CHUA516	CHUA715	CHUA716-BK
希望小売価格(税込)	オープン価格		
寸法	約105(幅)×166(高さ)×132(奥行)mm		
質量(電池含まず)	本体:約400g、カフ(腕帯):約150g		
カフ(腕帯)	ハードカフ		
適用腕周範囲	約17.0～ 36.0cm		
メモリー	90 回分	90 回× 2 人分	
朝・夜メモリー	—	●	
測定日時表示	●	●	
平均値	最新3 回	最新3 回、朝・夜 最新7日間	
血圧分類表示	● ※1	● ※1	
脈間隔変動マーク	●	●	
体動マーク	●	●	
カフ巻きエラーマーク	●	●	
日時表示	●	●	
電源	単3 形 乾電池×4本または単3形ニッケル水素充電電池×4本※2		
ACアダプター対応	—	● (別売りAC-230Z-J)	
充電電池対応		● ※2	
電池寿命	アルカリ乾電池:約500回/マンガン乾電池:約150回 ※3		
付属品	カフ(腕帯)一式、単3形アルカリ乾電池(モニター用)、取扱説明書/ 保証書/EMC技術資料、医療機器添付文書		
販売名	シチズン上腕式血圧計 CHUAシリーズ		
医療機器認証番号	228ADBZX00030000		
JANコード	4562191602181	4562191602198	4562191602204

梱包情報

個装箱サイズ	144(幅)×142(奥行)×187(高さ)mm/約810g
--------	--------------------------------

※1:世界保健機構(WHO)/国際高血圧学会(ISH)の血圧分類に基づく

※2:取扱説明書に記載の充電電池使用の場合

※3:1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合

■ お問い合わせ、ご用命は…

商品に関するご相談・お問い合わせは、弊社お客様相談室でお受けいたします。
受付時間:10～17時 月～金(祝祭日、年末年始を除く) 通話料金は無料です。

0120-88-6295

- CITIZENは、シチズンホールディングス株式会社の登録商標です。
- ご購入の際は、販売店、購入年月日等を記入した保証書を必ずお受け取りのうえ、大切に保管してください。
- 製品の仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
- 製品の色は、印刷の関係で実際の色とは若干異なる場合があります。
- 製品に不明な点がありましたらお問い合わせください。
- 本体画面の数値は一例です。

シチズン・システムズ株式会社

〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12

<http://www.citizen-systems.co.jp>

E-mail: support@systems.citizen.co.jp

CITIZEN

シチズン上腕式血圧計

ハードカフ



CHUA516 CHUA715 CHUA716-BK

片手でも巻きやすいハードカフで かんたん装着

CHUA516 CHUA715 CHUA716-BK

ハードカフ



腕にフィットしやすい ハードカフ

- ・巻きやすく装着がかんたん
- ・適用腕周範囲は17～36cm
- ・細腕にも対応

やさしい肌触り

- ・触り心地がなめらか
- ・汚れがつきにくい、目立たない

シチズンが独自に開発・設計したカフ形状により、2層の圧迫機構で測定に必要な圧力が均一化され、測定値がより安定しやすくなりました※。

適用腕周範囲は17～36cmで、腕の細い女性から腕の太い男性まで使用できます。

※当社比



コンパクトな省スペースボディ

※図は、CHUA715

使いやすさにこだわった親切設計

- 大画面液晶に見やすい表示
- 操作性の良い大きな測定ボタン
- 平均値表示
- 脈間隔変動マーク・体動マーク
- 測定結果を日付・時刻とともにメモリー

背面にカフを
収納できます。



ハードカフモデルのラインアップ



CHUA516

測定値が見やすい
大画面モデル

90回分メモリー



CHUA715

2人分の測定値を
メモリー

90回×2人分、
朝・夜メモリー

ACアダプター対応（別売）



CHUA716-BK

スタイリッシュな
ブラックモデル

本体前面UV塗装

90回×2人分、
朝・夜メモリー


ACアダプター対応（別売）



6段階の 血圧分類表示 ※1

測定値のレベルが
ひと目で分かる
血圧分類表示。

世界保健機構（WHO）/
ISH（国際高血圧学会）
による血圧分類表

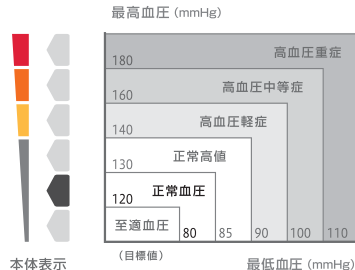

本体表示

最低血圧 (mmHg)



置時計として 使用可能

測定しないときは
3パターンの
表示から選べる
置時計として
使用できます。



1. 月日大表示



2. 時間大表示



3. 小表示



「カフ巻きエラーマーク」

カフ（腕帯）の巻き方が緩い場合、「カフ巻きエラーマーク」
で分かりやすくお知らせします。



ニッケル水素充電電池に対応 ※2